



LEVANTAMIENTO DE HUELLA DACTILAR

EN SUPERFICIE LISA CON POLVO



OBJETIVO

Revelar, levantar y preservar huellas dactilares en superficies lisas no porosas utilizando polvo.

EQUIPO Y MATERIALES



Polvo para huellas



Brocha para huellas



Cinta de levantamiento



Tarjeta de respaldo



Cámara fotográfica



Marcador permanente



Bolsa o sobre para evidencia

PASO A PASO: LEVANTAMIENTO DE HUELLA CON POLVO

1 OBSERVA

Examina la superficie para localizar la huella visible o latente.



2 APLICA EL POLVO

Aplica el polvo suavemente con la brocha usando movimientos ligeros y circulares.



3 REVELA LA HUELLA

Continúa hasta que la huella se revele claramente.



4 RETIRA EL EXCESO

Retira el exceso de polvo con la brocha suavemente sin tocar la huella.



5 PREPARA LA CINTA

Corta un trozo de cinta de levantamiento del tamaño adecuado y despegas un pequeño borde sin tocar el adhesivo.



6 LEVANTA LA HUELLA

Coloca la cinta sobre la huella y presiona suavemente. Levanta la cinta tirando del borde.




7 COLOCA EN LA TARJETA

Pega la cinta con la huella sobre la tarjeta de respaldo presionando los extremos.



8 ROTULA LA EVIDENCIA

Escribe la información en la tarjeta de respaldo sin tocar la huella.

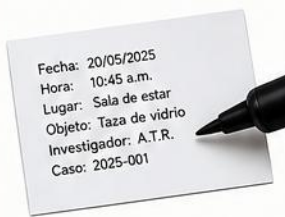

9 EMBALA LA EVIDENCIA

Coloca la tarjeta en un sobre o bolsa para evidencia. Sella y firma sobre el sello de seguridad.



DOCUMENTA: FOTOGRAFÍA FORENSE

Fotografía la huella antes de levantarla. Incluye escala métrica y enfoque nítido.



INFORMACIÓN QUE DEBES INCLUIR

- ✓ Fecha y hora
- ✓ Lugar
- ✓ Descripción del objeto
- ✓ Tipo de superficie
- ✓ Nombre del investigador
- ✓ Número de caso

RECUERDA

- Usa guantes en todo momento.
- No toques la huella con tus dedos ni con la brocha.
- Usa el polvo adecuado según el color de la superficie.
- Trabaja con movimientos suaves.

CADA DETALLE CUENTA.

UNA HUELLA PUEDE HACER LA DIFERENCIA.